


RECLAR

BEAUTY RITUALS REIMAGINED

El peeling ultrasónico con agua elimina eficazmente el sebo, las células viejas y limpia en profundidad los poros obstruidos. La frecuencia de 28-30 kHz garantiza el máximo efecto de limpieza y, al mismo tiempo, la amabilidad de la piel.



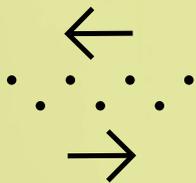

Ritual de limpieza


El resultado: piel limpia libre de células viejas e impurezas, lista para absorber los ingredientes activos de tus cosméticos favoritos.

Necesitas: un lugar tranquilo con espejo, piel de maquillaje, Reclar Ritual Peeler, 5 minutos de tiempo.

Procedimiento: Encienda Peeling y deslice el pelador desde la parte inferior hasta la nariz y hacia arriba hasta el centro de la frente, desde la boca hasta las orejas y desde la punta de la nariz hacia arriba. Humedezca la cara continuamente con un nade húmedo, por ejemplo.

Recomendamos un ritual de limpieza de 1 a 2 veces por semana, dependiendo de su tipo de piel.

Ritual de curación

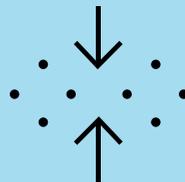

El resultado: una piel curada y calmada, la eliminación de cicatrices y manchas, y, además, unos efectos cosméticos más eficaces.

Necesitas: tu crema, sérum o mascarilla favorita, Ritual Peeler Reclar, unos minutos de tiempo.

Procedimiento: Gire el pelador por la parte delantera hacia usted y pase el cabezal desde el centro de la cara hacia los lados. Toca las barandillas laterales para hacer brillar la luz azul curativa.

Se recomienda realizar el ritual de curación con regularidad, basta con unos minutos al día.





La luz azul trata el acné y esteriliza el tejido para prevenir una mayor inflamación.

Al mismo tiempo, ayuda a curar heridas y pequeñas cicatrices.

La galvanización aumenta el efecto de los cosméticos de cuidado y ayuda a mantenerla flexibilidad después de la piel.


Ritual rejuvenecedor

El resultado: piel suave y brillante, piel tirada hacia abajo, activación de la producción de colágeno.

Necesitas: tu crema, sérum o mascarilla favorita, Ritual Peeler Reclar, unos minutos de tiempo.


Procedimiento: Aplique su crema facial, máscara o suero favorito y active la función G-Red. Gire el pelador hacia usted y mueva la cabeza desde el centro de la cara hacia los lados. Durante la terapia, sostenga el pelador a los lados para encender una luz roja rejuvenecedora.

Se recomienda realizar un ritual rejuvenecedor regularmente, solo unos minutos.

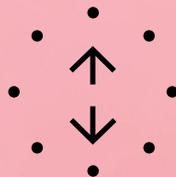

La luz roja activa el colágeno, reduce las arrugas y las manchas de pigmento, tensa los poros. La galvanización aumenta el efecto de los cosméticos de cuidado y ayuda a mantener la elasticidad de la piel.



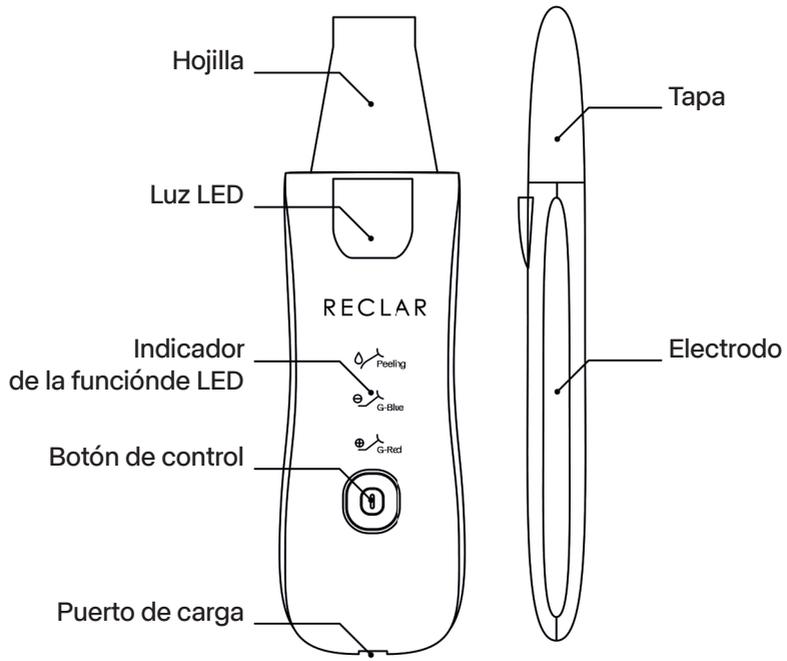


Inicio rápido

1) Cargue completamente el dispositivo con el cable incluido.

No ejerza una fuerza excesiva al introducir el cable en el aparato. La carga se indica con una luz roja. La carga completa se indica con una luz azul.

2) Retire la tapa de la cuchilla.

Doble la tapa de la cuchilla hacia usted como se muestra.

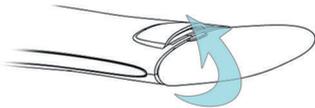

3) Encienda el aparato pulsando prolongadamente el botón de control.



4) Seleccione la función deseada:

-  Peeling - pulsar el botón de control 1 vez brevemente
-  G-Azul - pulsar el botón de control 2 veces brevemente
-  G-Rojo - pulsar el botón de control 3 veces brevemente

Nota: Para activar la terapia de luz, es necesario tocar los electrodos - los rieles laterales de metal - durante la aplicación.

Si está aplicando G-Blue o G-Red en otra persona, debe cerrar adicionalmente el circuito tocando a esta persona.

5) Apague el aparato pulsando prolongadamente el botón de control.

Después de cada uso, limpie suavemente la cuchilla con un paño de algodón o desinfectela.

FUNCIÓN PEELING



Limpieza ultrasónica de la piel

Puede realizarse de 1 a 2 veces por semana según el tipo de piel. La duración de la limpieza de la piel se ajusta a un máximo de 5 minutos, tras los cuales la función se desconecta automáticamente. Se recomienda no superar este tiempo en un solo uso.

Paso 1: Exfoliar y lavar la piel. La piel debe permanecer ligeramente húmeda durante el proceso de exfoliación, por lo que se recomienda preparar, por ejemplo, un algodón empapado en agua con el que se puede humedecer la piel regularmente.

Paso 2: Encienda el dispositivo pulsando el botón durante un tiempo prolongado. Para activar la función Peeling, pulse el botón una vez brevemente hasta que se encienda la luz de la función deseada. Si tienes el dispositivo en modo de espera, sólo tienes que pulsar brevemente una vez.

Paso 3: Deje el pelador hacia atrás y presione ligeramente la cuchilla contra la piel humedecida. Mueve el pelador desde las sienes hasta la nariz y hasta la mitad de la frente, luego desde las orejas hasta la boca y desde la punta de la nariz hacia arriba. Sigue humedeciendo la cara. La exfoliación puede resecar la piel, por lo que recomendamos aplicar tu crema hidratante favorita después de la limpieza.

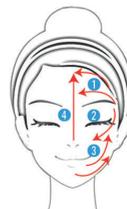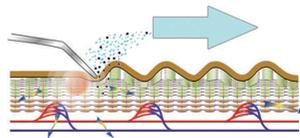

FUNCIÓN G-BLUE



Galvanización con terapia de luz azul

Se puede utilizar a diario. La duración de una terapia se establece en un máximo de 5 minutos, después de lo cual la función se apaga automáticamente. Te recomendamos que no excedas este tiempo.

Paso 1: Aplique sus cosméticos de cuidado redondeados (crema, máscara o suero) sobre la piel limpia. La piel debe estar suficientemente humedecida con el producto seleccionado.

Paso 2: Encienda el aparato presionando el botón durante mucho tiempo. Para activar la función G-Blue, presione brevemente el botón dos veces seguidas hasta la posición donde se ilumina la cuenta de rollo de la función deseada. Si el dispositivo está en modo de espera, simplemente presiónelo 2 veces brevemente.

Paso 3: Gire el pelador hacia usted y mueva la cabeza desde el centro de la cara hacia los lados. Durante la terapia, sostenga el pelador a los lados para encender una luz azul curativa.

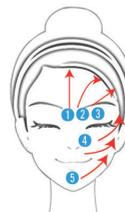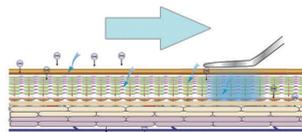

FONCTION G-RED



Galvanización con terapia de luz roja

Puede utilizarse diariamente. La duración de una sesión de terapia se ajusta a un máximo de 5 minutos, tras los cuales la función se desconecta automáticamente. Se recomienda no sobrepasar este tiempo.

Paso 1: Aplique su producto de cuidado de la piel favorito (crema, mascarilla o sérum) sobre la piel limpia. La piel debe estar suficientemente humedecida con el producto elegido.

Paso 2: Encienda el dispositivo pulsando el botón durante un tiempo prolongado. Para activar la función G-Red, pulse brevemente el botón 3 veces seguidas hasta que se encienda la luz de la función deseada. Si tiene el instrumento en modo de espera, sólo tiene que pulsar 3 veces brevemente.

Paso 3: Gire el pelador de frente y mueva el cabezal desde el centro de la cara hacia los lados. Durante el tratamiento, sostenga el pelador por los lados para que brille la luz roja rejuvenecedora.

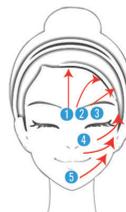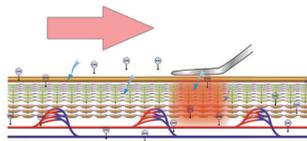

Preguntas Frecuentes

¿Puedo utilizar el pelador en la ducha?

El producto no es impermeable. Mojarlo puede dañarlo.

¿Cómo se limpia la cuchilla?

Se recomienda limpiar la cuchilla con un paño Reclar o un material de algodón suave.

¿Con qué desinfectar?

Para desinfectar, utilice un limpiador a base de alcohol.

¿Está bien si la hoja se mueve?

La cuchilla tiene la holgura necesaria para que el pelador funcione correctamente al vibrar, por lo que no hay que tirar de ella con fuerza, sólo hay que pasarla suavemente.

¿Dónde poner el pelador después de usarlo?

Guarde el pelador en un lugar seco. No se recomienda dejarlo en el baño o en cualquier otra habitación húmeda.

¿Puedo utilizar la peladora durante el embarazo?

La función de pelado sí. No se recomienda utilizar las funciones G-Blue y G-Red durante el embarazo.

¿La luz es perjudicial para los ojos?

Cuando utilice las funciones G-Blue y G-Red, siga las instrucciones para evitar que la luz LED le dé directamente en los ojos.

¿Qué hacer si las luces no están encendidas?

Para cerrar el circuito de galvanoplastia y encender la luz de terapia, es necesario sujetar los electrodos laterales (barras metálicas) mientras se utiliza G-Blue y G-Red.

¿Puedo utilizar el pelador en otra persona?

Si aplicas G-Azul y G-Rojo en otra persona, tienes que cerrar el circuito galvánico tocando a esa persona. Esto no es necesario para la función Peeling.

¿Es necesario utilizar cosméticos especiales?

El Peeler Reclar se puede utilizar con cualquier cosmético para el cuidado de la piel.

¿Puedo utilizar las funciones individuales sin limitaciones?

Se recomienda no superar el tiempo de uso preestablecido para cada función.

¿Cómo se carga la peladora?

Utiliza el cable incluido con cualquier fuente USB. Introduce el cable de carga con cuidado. Recomendamos cargar siempre el dispositivo por completo.

¿Cómo puedo saber si la peladora está vacía?

Cuando la batería esté baja, el indicador LED se encenderá 5 veces y el aparato se apagará. Recomendamos una carga preventiva después de aproximadamente 30 minutos de uso.

¿Cuándo está el dispositivo completamente cargado?

La carga se indica con una luz roja. Cuando el dispositivo está completamente cargado, se enciende la luz azul del indicador.

¿Puedo utilizar el pelador mientras se está cargando?

El dispositivo no funciona durante la carga.

El dispositivo no se carga, ¿qué puedo hacer?

Si el dispositivo no se carga, no intente forzar el cable de carga en el dispositivo. Esto puede dañar el cable. En este caso, utilice otro cable de carga compatible.



reclar.com/instructions



reclar.com

