


RECLAR

BEAUTY RITUALS REIMAGINED

Il peeling con acqua ad ultrasuoni rimuove efficacemente il sebo, le cellule morte e pulisce in profondità i pori ostruiti. La frequenza di 28-30 kHz garantisce il massimo effetto detergente e allo stesso tempo la delicatezza sulla pelle.



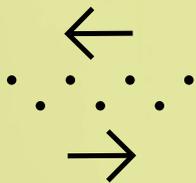

Rituale di pulizia


Risultato: una pelle pulita, priva di cellule morte e impurità, pronta ad assorbire i principi attivi dei tuoi prodotti cosmetici preferiti.

Hai bisogno di: un posto tranquillo e uno specchio, il viso struccato, Ritual peeler Reclar, 5 minuti di tempo.

Procedura: Attivare la funzione Peeling e muovere il peeler dalle tempie in basso verso il naso e dall'alto verso il centro della fronte, quindi dalla bocca alle orecchie e dalla punta del naso verso l'alto. Inumidire continuamente il viso, ad esempio con un dischetto di ovatta umido.

Si consiglia di effettuare il rituale di pulizia 1-2 volte alla settimana a seconda del tipo di pelle.

Rituale curativo

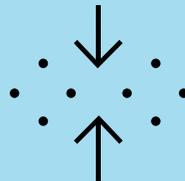

Risultato: pelle guarita e lenita, rimozione di cicatrici e macchie, come bonus un'azione più efficace dei prodotti cosmetici.

Ti servono: la tua crema, siero o maschera preferita, Ritual Peeler Reclar, qualche minuto di tempo.

Procedura: Applicare sulla pelle la crema, la maschera o il siero preferiti e attivare la funzione G-Blue. Girare il Peeler con la parte anteriore verso di sé e passare la testina dal centro del viso verso i lati. Durante la procedura toccare le guide laterali in modo che la luce blu curativa sia accesa.

Si consiglia di eseguire il rituale curativo con regolarità, bastano pochi minuti al giorno.





La luce blu cura l'acne e sterilizza i tessuti per prevenire ulteriori infiammazioni. Allo stesso tempo favorisce la guarigione di ferite e piccole cicatrici. La galvanizzazione aumenta l'effetto dei cosmetici e aiuta a mantenere la pelle elastica.


Rituale di ringiovanimento

Risultato: pelle liscia e radiosa, pori chiusi, attivazione della produzione di collagene.

Ti servono: la tua crema, siero o maschera preferita, Ritual Peeler Reclar, qualche minuto di tempo.


Procedura: Applicare sulla pelle la crema viso, la maschera o il siero preferiti e attivare la funzione G-Red. Girare il Peeler con la parte anteriore verso di sé e passare la testina dal centro del viso verso i lati. Durante la terapia, tenere il peeler per i lati in modo che la luce rossa di ringiovanimento sia accesa.

Si consiglia di eseguire il rituale di ringiovanimento con regolarità, bastano pochi minuti al giorno.

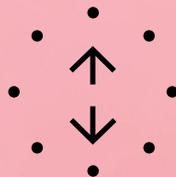

La luce rossa attiva il collagene, riduce le rughe e le macchie di pigmento e restringe i pori. La galvanizzazione aumenta l'effetto dei cosmetici e aiuta a mantenerla pelle elastica.



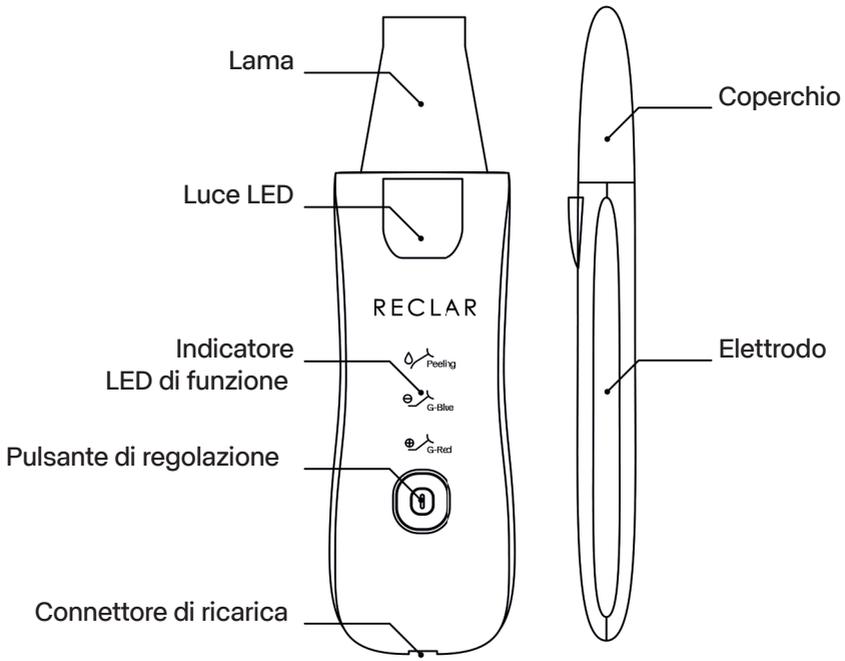


Accensione rapida

1) Caricare completamente il dispositivo usando il cavo in dotazione.

Non esercitare troppa forza quando si inserisce il cavo nel dispositivo. La carica è indicata dalla luce rossa. La luce blu indica la carica completa.

2) Rimuovere il coperchio della lama.

Capovolgere il coprilama verso di sé come da figura.

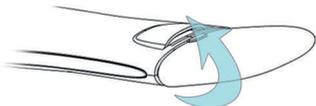

3) Accendere il dispositivo tenendo premuto a lungo il pulsante di controllo.



4) Selezionare la funzione desiderata:



Peeling – premere brevemente 1 volta il pulsante di controllo



G-Blue – premere brevemente 2 volte il pulsante di controllo



G-Red – premere brevemente il pulsante di controllo 3 volte

Nota: Per attivare la fototerapia è necessario toccare gli elettrodi durante l'uso, ovvero le guide metalliche laterali.

Se si applica la G-Blue o G-Red a un'altra persona, bisogna anche chiudere il circuito toccando la persona.

5) Spegner il dispositivo tenendo premuto a lungo il pulsante di controllo.

Dopo ogni utilizzo, pulire delicatamente la lama con un panno di cotone, eventualmente disinfettarla.

FUNZIONE PEELING



Pulizia della pelle ad ultrasuoni

Si può utilizzare 1-2 volte alla settimana a seconda del tipo di pelle. La durata della pulizia è impostata per un massimo di 5 minuti, dopo la funzione si spegne automaticamente. Si consiglia di non superare questo intervallo di tempo per un singolo utilizzo.

Fase 1: Struccarsi e pulire la pelle. La pelle dovrebbe rimanere leggermente umida durante il peeling, quindi consigliamo di preparare, ad esempio, un dischetto di ovatta imbevuto di acqua da usare per idratare regolarmente la pelle.

Fase 2: Tenere premuto a lungo per accendere il dispositivo. Per attivare la funzione Peeling, premere brevemente una volta il pulsante fino alla posizione in cui si accende la spia della funzione desiderata. Se il dispositivo è in modalità standby, premere brevemente una volta.

Fase 3: Lasciare il Peeler rivolto verso di sé, appoggiare leggermente la lama sulla pelle umida. Muovere il peeler dalle tempie in basso verso il naso e dall'alto verso il centro della fronte, poi dalla bocca alle orecchie e dalla punta del naso verso l'alto. Inumidire costantemente il viso. Il peeling può seccare la pelle, quindi si consiglia di applicare i cosmetici idratanti preferiti dopo la pulizia.

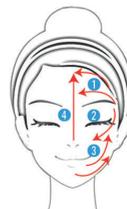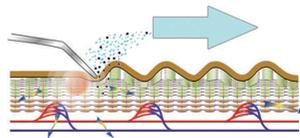

FUNZIONE G-BLUE


Galvanizzazione con terapia a luce blu

Si può usare quotidianamente. La durata della terapia è impostata per un massimo di 5 minuti, dopo la funzione si spegne automaticamente. Si consiglia di non superare questo intervallo di tempo.


Fase 1: Applicare i cosmetici preferiti (crema, maschera o siero) sulla pelle pulita. La pelle deve essere sufficientemente idratata con il prodotto scelto.



Fase 2: Tenere premuto a lungo per accendere il dispositivo. Per attivare la funzione G-blue, premere brevemente 2 volte il pulsante fino alla posizione in cui si accende la spia della funzione desiderata. Se il dispositivo è in modalità standby, premere brevemente 2 volte.

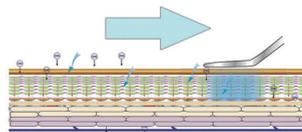

Fase 3: Girare il Peeler con la parte anteriore verso di sé e passare la testina dal centro del viso verso i lati. Durante la terapia, tenere il peeler per i lati in modo che la luce blu curativa sia accesa.

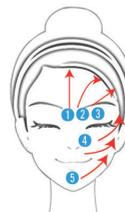


FUNZIONE G-RED


Galvanizzazione con terapia a luce rossa

Si può usare quotidianamente. La durata della terapia è impostata per un massimo di 5 minuti, dopo la funzione si spegne automaticamente. Si consiglia di non superare questo intervallo di tempo.


Fase 1: Applicare i cosmetici preferiti (crema, maschera o siero) sulla pelle pulita. La pelle deve essere sufficientemente idratata con il prodotto scelto.

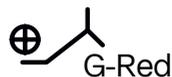

Fase 2: Tenere premuto a lungo per accendere il dispositivo. Per attivare la funzione G-red, premere brevemente 3 volte il pulsante fino alla posizione in cui si accende la spia della funzione desiderata. Se il dispositivo è in modalità standby, premere brevemente 3 volte.

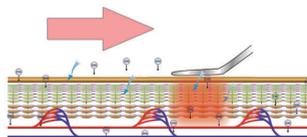

Fase 3: Girare il Peeler con la parte anteriore verso di sé e passare la testina dal centro del viso verso i lati. Durante la terapia, tenere il peeler per i lati in modo che la luce rossa di ringiovanimento sia accesa.

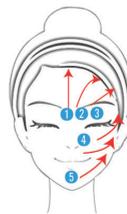

Domande frequenti

Posso usare il peeler sotto la doccia?

Il prodotto non è resistente all'acqua. Se il dispositivo si bagna si può danneggiare.

Come si pulisce la lama?

Si consiglia di pulire la lama con un panno Reclar o con del materiale morbido di cotone.

Con che cosa si può disinfettare?

Per disinfettare usare un prodotto a base di alcol.

È normale che la lama si muova?

La lama dispone del gioco necessario per far funzionare correttamente il peeler quando vibra, quindi non va tirata con forza, basta strofinarla delicatamente.

Dove si può riporre il peeler dopo l'uso?

Conservare sempre il dispositivo in un luogo asciutto. È sconsigliato lasciarlo in bagno o in altri ambienti umidi.

Posso usare il peeler in gravidanza?

La funzione Peeling sì. In gravidanza si sconsigliano le funzioni G-Blue e G-Red.

La luce è dannosa per gli occhi?

Quando si utilizzano le funzioni G-Blue e G-Red, seguire le istruzioni per evitare che la luce LED colpisca direttamente gli occhi.

Cosa fare se la luce non si accende?

Per chiudere il circuito di galvanizzazione e accendere la luce terapeutica, è necessario tenere gli elettrodi laterali (guide metalliche) durante l'utilizzo di G-Blue e G-Red.

Posso usare il peeler su un'altra persona?

Se applichi le funzioni G-Blue e G-Red ad un'altra persona, devi chiudere il circuito galvanico toccando la persona. Questa procedura non è necessaria per la funzione Peeling.

È necessario usare prodotti cosmetici particolari?

Il Peeler Reclar può essere utilizzato con qualsiasi prodotto cosmetico.

Posso utilizzare le singole funzioni senza limitazioni?

Si consiglia di non superare il tempo di utilizzo preimpostato per ciascuna funzione.

Come si carica il peeler?

Usare il cavo in dotazione con qualsiasi sorgente USB. Inserire delicatamente il cavo di ricarica. Si consiglia di caricare sempre completamente il dispositivo.

Come faccio a sapere che il peeler è scarico?

Quando la batteria è scarica, l'indicatore LED si accende 5 volte e il dispositivo si spegne. Si consiglia di effettuare una ricarica preventiva dopo circa 30 minuti di utilizzo.

Quand'è completamente carico il dispositivo?

La ricarica è indicata dalla luce rossa. Quando è completamente carico, la spia blu si accende.

Posso usare il peeler durante la ricarica?

Il dispositivo non funziona durante la ricarica.

Il dispositivo non si carica, cosa fare?

Se il dispositivo non si carica, non forzare il cavo di ricarica nel dispositivo. Il cavo potrebbe essere danneggiato. In questo caso, utilizzare un altro cavo di ricarica compatibile.



reclar.com/instructions



reclar.com

