


RECLAR

BEAUTY RITUALS REIMAGINED

Ultradźwiękowy peeling wodny skutecznie usuwa łój skórny, stare komórki i głęboko oczyszcza zatkane pory. Częstotliwość 28-30 kHz gwarantuje maksymalny efekt oczyszczenia i jednocześnie delikatność dla skóry.



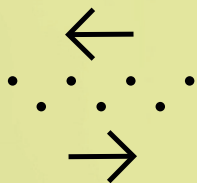

Rytuał oczyszczania


Efekt: czysta skóra wolna od starych komórek i zanieczyszczeń, gotowa do wchłonięcia aktywnych składników Twoich ulubionych kosmetyków.

Potrzebujesz: spokojne miejsce z lustrem, oczyszczoną skórę, Ritual peeler Reclar, 5 minut czasu.

Comment procéder: Włącz funkcję Peeling i przesuвай peelerem od skroni w dół do nosa i od góry do środka czoła, następnie od ust do uszu i od czubka nosa do góry. Stale zwilżaj twarz np. mokrym wacikiem.

Polecamy rytuał oczyszczania 1-2 razy w tygodniu w zależności od rodzaju skóry.

Rytuał lecniczy

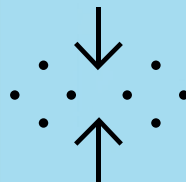

Efekt: wygojona i ukojona skóra, usunięcie blizn i przebarwień, jako bonus usprawnienie działania kosmetyków.

Potrzebujesz: swój ulubiony krem, serum lub maskę, Ritual Peeler Reclar, kilka minut czasu.

Jak postępować: Nałóż na skórę ulubiony krem, maskę lub serum i włącz funkcję G-Blue. Odwróć peeler w kierunku siebie i przesuwaj głowicę od środka twarzy na boki. Czyniąc to, dotykaj bocznych listew, aby świeciło lecznicze niebieskie światło.

Zalecamy regularne wykonywanie rytuału leczniczego, wystarczy tylko kilka minut dziennie.



A young man with long, dark, wavy hair is shown from the chest up. He is holding a white handheld device with a gold-colored metal plate against his right cheek. A soft blue light emanates from the device. The background is a solid light blue.

Niebieskie światło leczy trądzik i
sterylizuje tkankę, aby zapobiec
dalszemu zapaleniu. Jednocześnie
pomaga leczyć rany i drobne blizny.
Galwanizacja wzmacnia działanie
kosmetyków pielęgnacyjnych i
pomaga zachować
elastyczność skóry.


Rytuał odmładzający

Efekt: gładka i promienna skóra, zwężone pory, aktywacja produkcji kolagenu.

Potrzebujesz: swój ulubiony krem, serum lub maskę, Ritual Peeler Reclar, kilka minut czasu.


Jak postępować: Nałóż na skórę ulubiony krem, maskę lub serum i włącz funkcję G-Red. Odwróć peeler w kierunku siebie i przesuwaj głowicę od środka twarzy na boki. Podczas terapii trzymaj peeler po bokach tak, aby świeciło odmładzające czerwone światło.

Zalecamy regularne wykonywanie rytuału odmładzania, wystarczy tylko kilka minut dziennie.

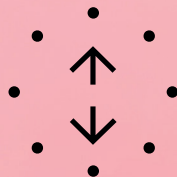

Czerwone światło aktywuje kolagen, spłyca zmarszczki i plamy pigmentacyjne, zwęża pory. Galwanizacja wzmacnia działanie kosmetyków pielęgnacyjnych i pomaga zachować elastyczność skóry.



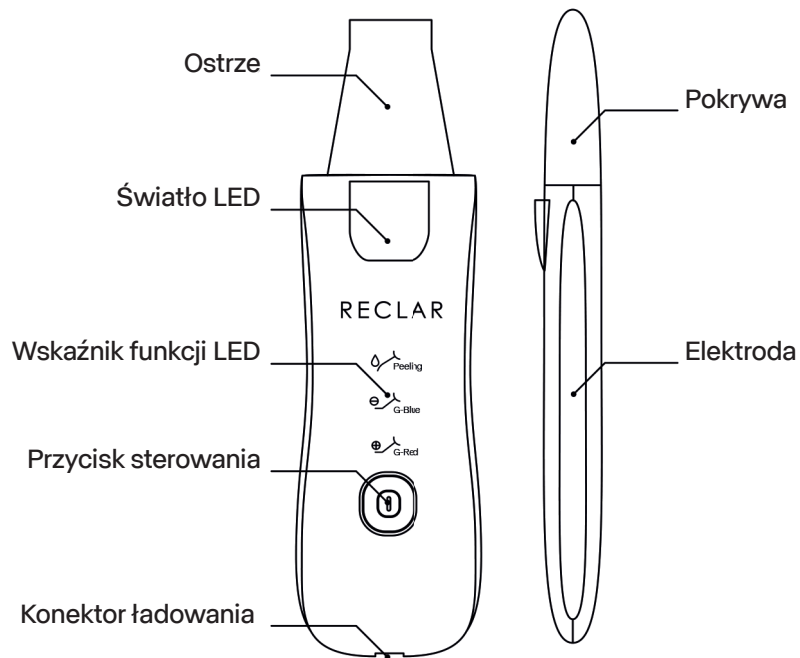

Szybki start

1) W pełni naładuj urządzenie za pomocą dołączonego kabla.

Nie używaj nadmiernej siły podczas wkładania kabla do urządzenia. Ładowanie sygnalizuje czerwone światło. Niebieskie światło oznacza pełne naładowanie.

2) Zdejmij osłonę ostrza.

Przechyl osłonę ostrza do siebie, jak pokazano na obrazku.



3) Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania, aby włączyć urządzenie.



4) Wybierz żądaną funkcję:



Peeling - naciśnij krótko 1 x przycisk sterowania



G-Blue - naciśnij krótko 2 x przycisk sterowania



G-Red - naciśnij krótko 3 x przycisk sterowania

Uwaga: Aby aktywować fototerapię, należy podczas aplikacji dotykać elektrod - bocznych metalowych listew.

Jeśli aplikujesz G-Blue lub G-Red na inną osobę, musisz również zamknąć obwód, dotykając tej osoby.

5) Wyłącz urządzenie przez długie naciśnięcie przycisku sterującego.

Po każdym użyciu delikatnie wyczyść ostrze bawełnianą szmatką lub zdezynfekuj.

FUNKCJA PEELINGU




Ultradźwiękowe oczyszczanie skóry

Można ją wykonywać 1-2 razy w tygodniu w zależności od rodzaju skóry. Czas oczyszczania skóry jest ustawiony na maksymalnie 5 minut, po czym funkcja wyłącza się automatycznie. Zalecamy nie przekraczać tego czasu przy jednym użyciu.

Krok 1: Usuń makijaż i umyj cerę. Powinna pozostać lekko wilgotna podczas peelingu, dlatego zalecamy przygotowanie np. wacika nasączonego wodą, którym można regularnie nawilżać cerę.

Krok 2: Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk. Aby aktywować funkcję Peeling, należy 1 x krótko nacisnąć przycisk do pozycji, w której zapali się lampka kontrolna żądanej funkcji. Jeśli masz urządzenie w trybie czuwania, po prostu 1 x krótko naciśnij.

Krok 3: Pozostaw peeler odwrócony tyłem do siebie, delikatnie przyłóż ostrze do wilgotnej skóry. Przesuwaj peeler od skroni dołem do nosa i od góry do środka czoła, następnie od uszu do ust i od czubka nosa do góry. Utrzymuj twarz wilgotną. Peeling może wysuszać skórę, dlatego po oczyszczeniu zalecamy nałożyć ulubione kosmetyki nawilżające.

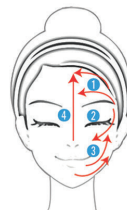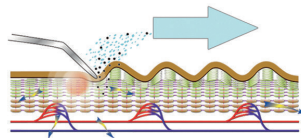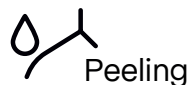


FUNKCJA G-BLUE


Galwanizacja z terapią światłem niebieskim

Może być stosowana codziennie. Czas jednej terapii jest ustawiony na maksymalnie 5 minut, po czym funkcja wyłącza się automatycznie. Zalecamy nie przekraczać tego czasu.

Krok 1: Na oczyszczoną skórę nanieś swoje ulubione kosmetyki pielęgnacyjne (krem, maskę lub serum). Skóra musi być odpowiednio nawilżona wybranym produktem.

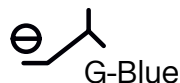

Krok 2: Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk. Aby aktywować funkcję G-Blue, należy 2 x krótko po sobie nacisnąć przycisk do pozycji, w której zapali się lampka kontrolna żądanej funkcji. Jeśli masz urządzenie w trybie czuwania, po prostu 2 x krótko naciśnij.

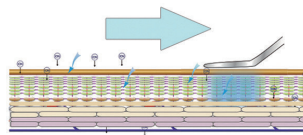

Krok 3: Odwróć peeler w kierunku siebie i przesuwaj głowicę od środka twarzy na boki. Podczas terapii trzymaj peeler po bokach tak, aby świeciło lecznicze niebieskie światło.




FUNKCJA G-RED


Galwanizacja z terapią światłem czerwonym

Może być stosowana codziennie. Czas jednej terapii jest ustawiony na maksymalnie 5 minut, po czym funkcja wyłącza się automatycznie. Zalecamy nie przekraczać tego czasu.

Krok 1: Na oczyszczoną skórę nanieś swoje ulubione kosmetyki pielęgnacyjne (krem, maskę lub serum). Skóra musi być odpowiednio nawilżona wybranym produktem.

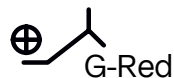

Krok 2: Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk. Aby aktywować funkcję G-Red, należy 3 x krótko za sobą nacisnąć przycisk do pozycji, w której zapali się lampka kontrolna żądanej funkcji. Jeśli masz urządzenie w trybie czuwania, po prostu 3 x krótko naciśnij.

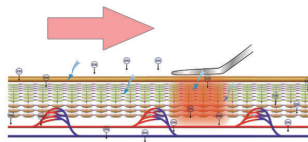

Krok 3: Odwróć peeler w kierunku siebie i przesuwaj głowicę od środka twarzy na boki. Podczas terapii trzymaj peeler po bokach tak, aby świeciło odmładzające czerwone światło.



Częste pytania

Czy mogę używać peelera pod prysznicem?

Produkt nie jest wodoodporny. Może ulec uszkodzeniu po zamoczeniu.

Jak czyścić ostrze?

Zalecamy czyszczenie ostrza ściereczką Reclar lub miękkim materiałem bawełnianym.

Czym dezynfekować?

Do dezynfekcji użyj środka czyszczącego na bazie alkoholu.

Czy to w porządku, kiedy ostrze się rusza?

Ostrze posiada niezbędny luz, aby peeler działał prawidłowo podczas wibracji, dlatego nie ciągnij go na siłę, tylko delikatnie przetrzyj.

Gdzie odłożyć peeler po użyciu?

Przechowuj peeler w suchym miejscu. Nie zalecamy pozostawiania go w łazience lub innym wilgotnym pomieszczeniu.

Czy mogę używać peelera w czasie ciąży?

Funkcję Peeling tak. Nie zaleca się stosowania funkcji G-Blue i G-Red podczas ciąży.

Czy światło jest szkodliwe dla oczu?

Postępuj zgodnie z instrukcjami podczas korzystania z funkcji G-Blue i G-Red, aby zapobiec świeceniu diod LED bezpośrednio w oczy.

Co robić, gdy światła nie świecą?

Przy korzystaniu z G-Blue i G-Red konieczne jest trzymanie bocznych elektrod (metalowych listew) w celu zamknięcia obwodu galwanizacyjnego i włączenia światła terapeutycznego.

Czy mogę użyć peelingu na innej osobie?

Jeśli zastosujesz funkcje G-Blue i G-Red na innej osobie, musisz zamknąć obwód galwaniczny, dotykając tej osoby. Nie jest to konieczne w przypadku funkcji Peeling.

Czy konieczne jest stosowanie specjalnych kosmetyków?

Peeler Reclar można stosować z dowolnymi kosmetykami pielęgnacyjnymi.

Czy mogę korzystać z poszczególnych funkcji w sposób nieograniczony?

Zalecamy, aby nie przekraczać wstępnie ustawionego czasu stosowania dla poszczególnych funkcji.

Jak ładować peeler?

Użyj dołączonego kabla z dowolnym źródłem USB. Delikatnie włóż kabel ładujący. Zalecamy, aby zawsze w pełni naładować urządzenie.

Skąd mam wiedzieć, czy peeler jest wyładowany?

Gdy bateria jest słaba, wskaźnik LED zapala się 5 razy, a urządzenie wyłącza się. Zalecamy ładowanie zapobiegawcze po około 30 minutach użytkowania.

Kiedy urządzenie jest w pełni naładowane?

Ładowanie jest sygnalizowane czerwonym światłem. Po pełnym naładowaniu włącza się niebieska lampka wskaźnika.

Czy mogę używać peelera podczas ładowania?

Urządzenie nie działa podczas ładowania.

Urządzenie się nie ładuje, co z tym?

Jeśli urządzenie nie ładuje się, nie próbuj na siłę wpychać kabla ładującego do urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie kabla. W takim przypadku użyj innego kompatybilnego kabla ładującego.



reclar.com/instructions



reclar.com